

Quick Hygiene Terminal

システムアップデートマニュアル




dotBravoJapan,Inc

2020.10.27

Created by Y.Fujita

目次

.01	QHT アップグレード手順	-----	4
.02	エラーが出た場合	-----	7
.03	Wi-Fi 接続	-----	8
.04	QHT アプリの再起動	-----	10
.05	Wi-Fi 接続確認	-----	11

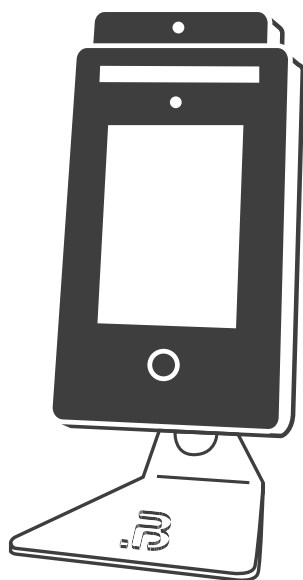


.01 QHT アップグレード手順


- ① 新しいソフトウェアが完成した際に、弊社 Web サイトよりバージョンアップソフトウェアをダウンロードしていただきます。 <https://www.dotbravo.jp/>



- ② パソコンに「クイックハイジーンターミナル 最新ソフトウェア」の zip ファイルがダウンロードされました。

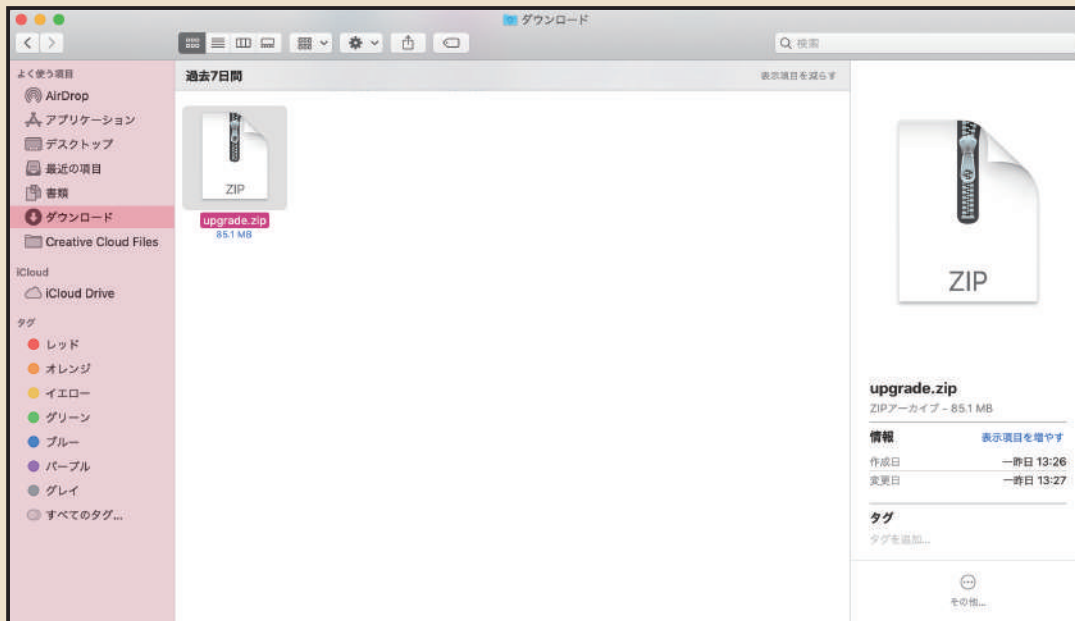

- ③ ダウンロードした zip ファイルを USB メモリに移します。

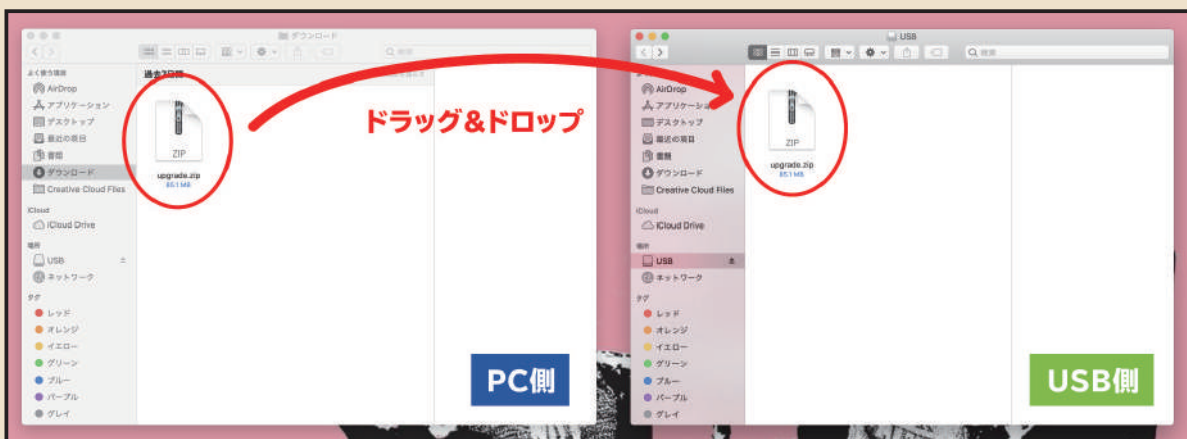


- この時、zip ファイルは解凍せずにそのまま USB メモリに移します。
- ファイル名が「**upgrade.zip**」であることを確認してください。
ファイル名が「**upgrade(1).zip**」等になっているとアップグレードできません。
「**upgrade(1).zip**」等になっている場合、「**upgrade.zip**」に名前を変更してから USB メモリに移してください。

.01 アップグレード手順



- ④ QHTが「スタンバイ画面」または「検温画面」になっている状態で
③で準備したUSBメモリをQHTに挿入します。

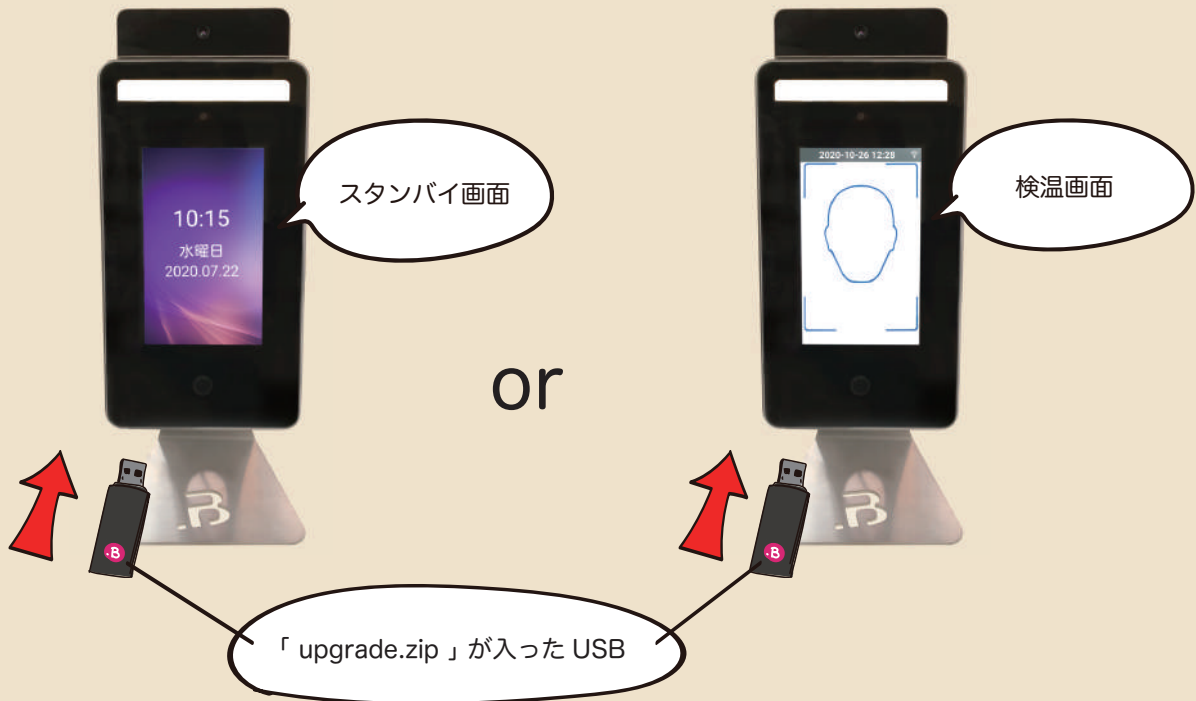

- ⑤ 5～10秒ほど待つと
アップグレードが始まります。

- ⑥ 下記の画面が出たら
USBを取り外します。

- ⑦ QHT本体が再起動します。
これでアップグレードは完了です。




.02 エラーが出た場合



9月30日より前にリリースされているバージョンをお使いの場合
アップグレードでエラーが出ます。
エラーが出た場合は、QHT 本体をネット接続する必要があります。

ネット回線と接続されている LAN ケーブルでも OK です

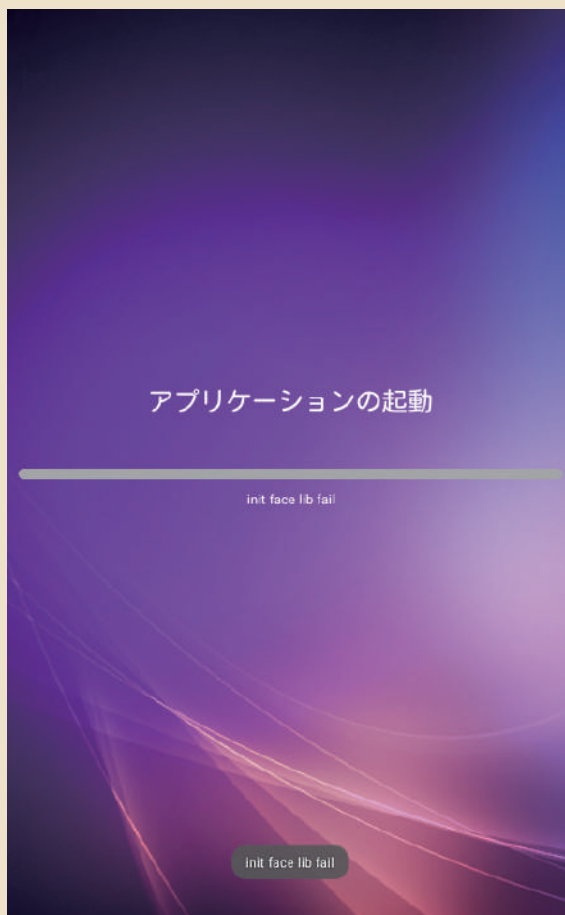

上図のように、アップグレードの最中に画面が止まってしまったら
ネットに接続してください。

.03 Wi-Fi 接続


Wi-fi に接続する




① 画面下部を上にはスワイプします。



② 真ん中の○をタップします。

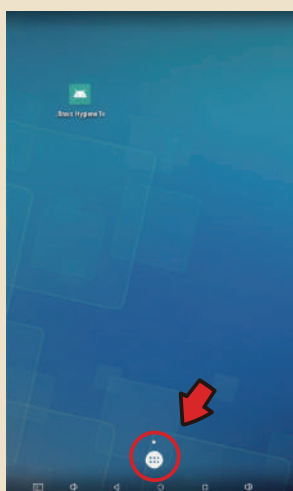

③ 画面下の穴が開いた白丸をタップします。

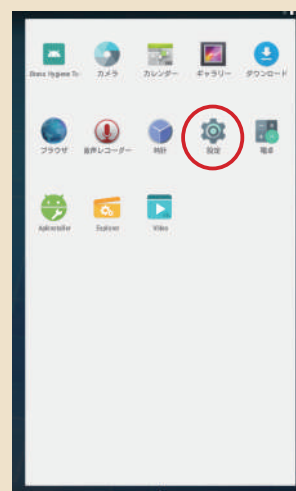


④ 「設定」をタップします。



⑤ 「Wi-fi」をタップします。



⑥ OFF を ON にします。

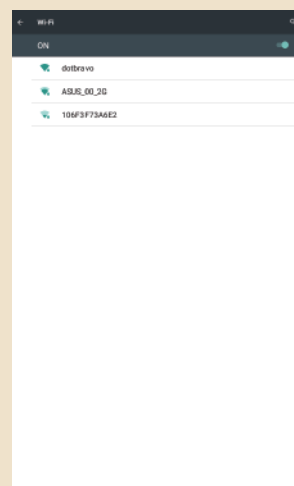


⑦ ON にすると
Wi-Fi 情報が表示されるので
該当する Wi-Fi をタップします。



⑧ Wi-fi のパスワードを入力して接続します。



⑨ 「接続済み」が表示されれば
OK です。

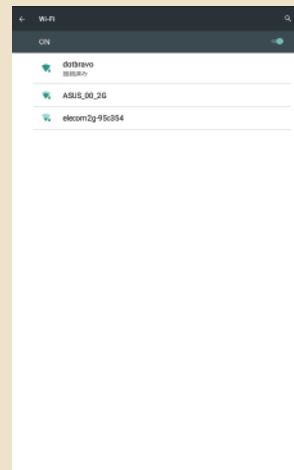

.04 QHT アプリの再起動



Wi-Fi に接続したら QHT のアプリを再起動します。



① 画面下部を上
に
スワイプします。

② 真ん中の○をタップします。

③ QHT のアプリを
タップします。



④ これで QHT のアプリの
再起動ができました。

ネット環境によっては
QHT 本体が再起動されない場合があるので
改善されない場合は、①～④ の作業を
何度か試してください。

.05 Wi-Fi 接続確認




Wi-Fi に接続されているかどうかの確認手順です。




① 画面下部を上
にスワイプします。




② 真ん中の○をタップします。

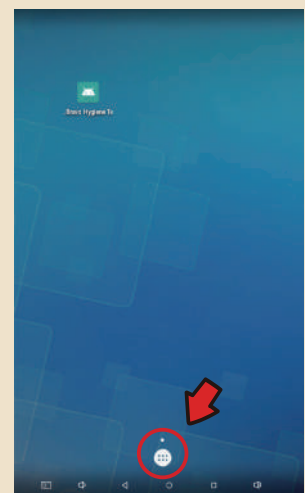

③ 画面下の穴が開いた
白丸をタップします。

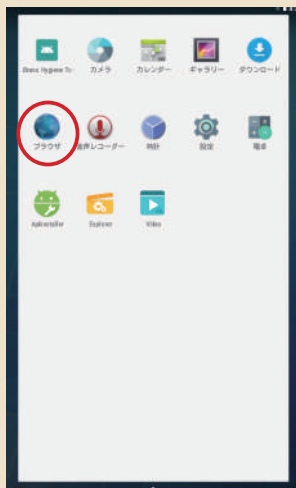

④ 「ブラウザ」をタップします。

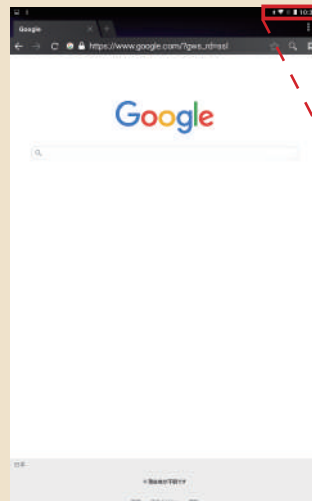

⑤ Google など何かしらの
ブラウザが開けば、ネットに
接続されています。



⑥ QHT 画面の右上に
Wi-Fi のマークが
表示されていれば
Wi-Fi が接続されています。



Quick Hygiene Terminal

2020 dotBravoJapan, Inc All rights reserved